


ボーン マロウ コレクション システム

製品番号: BMC-2150

管理医療機器 承認番号22100BZ100003000

システムの特徴

- TRACバルブ™とYアダプターにより、骨髓液をスプレー状に放出させることなく、収集することが可能です。
- 一方のTRACバルブ™を押すことで、抗凝固剤バッグとYアダプターの流路が開き、コレクションコンテナへ抗凝固剤を追加注入することが可能です。
- もう一方のTRACバルブ™を押すことで、コレクションコンテナとYアダプターの流路が開き、採取した骨髓液をシリンジからコレクションコンテナに収集することが可能です(先端がロック形状のシリンジを用いてください)。
- 金属針を使用することなく、サンプル採取が行えます。
- ラテックスフリー製品です。

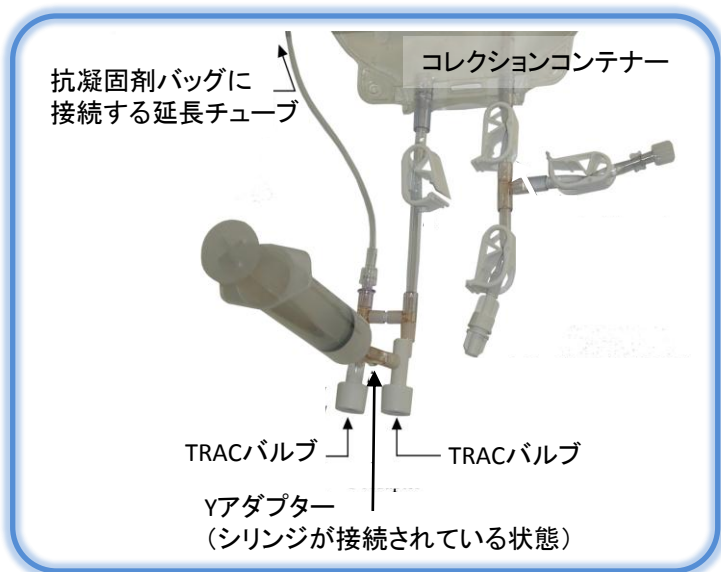

システムの構成部品

- コレクションコンテナ(1500mL) 1個
- フィルターセット(850μ、500μ、200μ) 1個
- トランスファーバッグ(600mL) 3個
- トランスファーバッグ(2000mL) 1個
- 抗凝固剤用バッグ(600mL) 1個
- 延長チューブ
(1260mm、チューブの両端がオス型ルアーのもの) 1個
- アダプター (両端がオス型ルアーのもの) 1個

- ※ 本品はすべて滅菌済みです
- ※ 本品は Disposable で再使用はできません
- ※ 本品のトランスファーバッグは遠心分離機に用いないで下さい



製造販売業者
株式会社タスク

〒328-0002
栃木県栃木市惣社町1485-11
問合せ先: TEL (0282-27-8426), FAX (0282-27-1943)

輸入先国名: アメリカ合衆国
製造業者名: バイオアクセス インク
BioAccess, Inc.

CAT-BMC-J01